



SILHOUET-TONE

Derma·Pod Technology

La **Tecnología Pod** ofrece multitud de tratamientos de rejuvenecimiento agregando los satélites al sistema de base de microdermabrasión.





RESULTADOS

Antes 1ª sesión

Después 10ª sesión




Antes 1ª sesión

Después 10ª sesión



El éxito del Derma-Pod de Silhouet-Tone está en su sistema de microdermabrasión

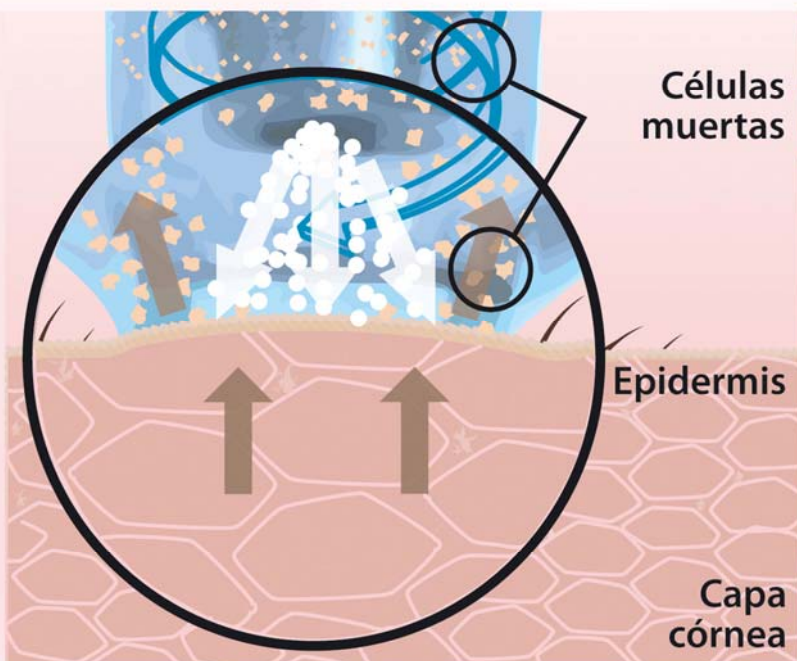

Piel uniforme, renovada y luminosa con la microdermoabrasión

- **Un potente motor permite una verdadera microdermabrasión.**
El aparato propulsa microcristales de corindón natural hacia la piel a una velocidad alta y constante.
- **El sistema de proyección Turbo Flow Patentado** impulsa sobre la piel los microcristales mediante un movimiento giratorio de espiral. Este movimiento es perfectamente uniforme y no provoca ni incomfort ni irritación.
- La función de control informatizada permite obtener una calibración instantánea, para tratamientos personalizados sin pérdida de tiempo.
- Gracias a los **40 parámetros preprogramados**, basta con un solo botón para obtener los tratamientos adaptados a cada piel; no es necesario recalibrar el aparato .
- Los **cartuchos desechables** tanto de cristales nuevos como usados permiten una sustitución rápida y fácil evitando las posibles roturas.
- Las boquillas de color desechables permiten ofrecer tratamientos precisos para rostro, cuerpo, estrías o cicatrices, de manera higiénica y personalizada.



Sistema **TURBO FLOW**

Los aparatos convencionales de microdermabrasión emiten un chorro directo de cristales sobre la piel por medio de un aplicador situado a un ángulo de 45 ó 90 grados. Al efectuar una abrasión variable e imprevisible, el método clásico puede causar un considerable enrojecimiento, incomfort e incluso rasguños, contusiones y hasta provocar la incrustación de cristales en la piel.

El **sistema patentado del Turbo Flow** del Derma•Pod soluciona estos problemas al generar una velocidad lineal y giratoria constante. Esta característica innovadora produce una abrasión perfectamente segura y homogénea que permite tratar con uniformidad la zona en cuestión.

Nuestro nuevo aplicador patentado ha sido pensado para que resulte fácil de utilizar y obtener resultados sin precedentes.

Derma•Pod

Technology

El sistema de microdermabrasión con tecnología POD (Puestos Operativos de Desarrollo)

Durante los últimos años los responsables de spas, clínicas médicas, institutos y salones de estética han reconocido el valor que representa la sinergia y la combinación de diversos métodos cuando se trata de obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible.

El Derma•Pod permite en un solo aparato múltiples tratamientos gracias a la combinación de tres procesos:

- Microdermabrasión
- Fotobiolifting
- Microcorrientes

La sinergia que se crea entre la microdermabrasión y los satélites multiplica la eficacia del resultado final.

- El programa de microdermabrasión Derma•Pod suprime hasta el 30 % de la epidermis. Resultado: mejor penetración del haz de luz y aplicación más eficaz de las microcorrientes.
- Asociada a la microdermabrasión, la eficacia de la fototerapia se potencia en un 35 %.
- Se constata una corrección visible e inmediata de las arruguitas, arrugas, defectos de pigmentación y descolgamiento de la piel.



Máximo Rejuvenecimiento de las capas de la piel con la opción de los satélites.

Kinelift

Programa completo Antienvejecimiento



- El programa de cuidados **Kinelift** está pensado para **controlar el proceso de envejecimiento** estimulando la epidermis y su estructura subyacente. El programa comprende:
 - » Luminoterapia con DEL a 640 nm
 - » Modulación de las microcorrientes
- Este procedimiento **no invasivo produce un lifting visible de la piel**. Esta triple estimulación del rostro combate los problemas propios del envejecimiento de la epidermis y de los músculos de la piel. Mejora el tono muscular; estimula la producción de colágeno y de ATP, y lucha contra los signos de envejecimiento.
- **Constatación:** El espectro de la luz roja desencadena una onda de energía que estimula los fotorreceptores de la piel, produciendo así una reacción celular. Las ondas de 640 nanómetros multiplican por cinco la producción de colágeno, poniendo en marcha mecanismos de reparación y estimulando los fibroblastos. Este proceso mejora la circulación y acelera la regeneración al llevar una cantidad mayor de oxígeno y nutrientes a la piel.
- **Constatación:** Las microcorrientes refuerzan las corrientes bioeléctricas naturales del cuerpo y reeducan a los tejidos musculares, produciendo así un efecto lifting visible. También remodelan la forma ovalada del rostro y ralentizan el proceso de envejecimiento.
- **Combinando las tres opciones en una sola sesión, se logra una mejora clara a largo plazo y resultados visibles.**

Dermalift

Lifting de cuello y escote. Mesoterapia Virtual



- El programa de cuidados de remodelación **Dermalift** combate la flacidez de la piel de manera sorprendente.
- Con la edad, los músculos del cuello y del busto pierden elasticidad. **Dermalift** utiliza una nueva forma de microcorrientes, pulsadas y moduladas según una estructura precisa, para reeducar a los grandes músculos, endurecer, reafirmar y remodelar el contorno del rostro y el escote
- El satélite **Dermalift** consta también de una **función especial de difusión tópica transdérmica (Mesoterapia Virtual)**. Se utilizan las nuevas corrientes bipolares de ondas equilibradas, que facilitan la difusión del producto y rellena las arrugas. Este sistema exclusivo elimina todos los problemas ligados a los procedimientos convencionales de iontoforesis.

Purelight

Contra las imperfecciones y problemas de Acné



- Este programa de supresión del acné mediante la luz violeta difundida a 420 nanómetros es increíble. Esta longitud de onda combate el acné; se utiliza por sus efectos antibacterianos para eliminar las imperfecciones y calmar las glándulas sebáceas.
- **Purelight** atenúa también los problemas de pigmentación y elimina las manchas rojas debidas a la utilización de productos agresivos.
- Los **DEL** utilizados en los satélites **Derma•Pod** no son diodos electroluminiscentes normales, como los que hay en los dispositivos luminosos. Los diodos superluminiscentes extremos (DSLE) de los satélites **Kinelift** y **Purelight** **son diez veces más potentes**. Están dotados con verdaderas bandas de frecuencias estrechas y producen una reacción a la luz eficaz, más rápida y sin riesgo.

Un completo centro de tratamientos

Con la compra del **Derma•Pod** y sus satélites revolucionará su Instituto y lo dotará de un **sistema de microdermabrasión potenciado con tratamientos antiedad y antiacné**

Derma·Pod

Technology

Nuevo satélite verde: Purelighth Green longitud de onda 525 nm

Esta longitud de onda actúa directamente sobre el melanocito y la hiperpigmentación, reduciendo la producción de melanina de un 40 a un 60%.

Luz Verde:

Bloquea la enzima responsable de la producción de la melanina (tirosina) y aclara las manchas de pigmentación ralentizando su aparición.

Provoca una reacción foto-química produciendo peróxido de hidrógeno en el agua contenida en los espacios intercelulares.

Además reduce las rojeces por su acción vasoconstrictora y estimula el proceso de reparación en el seno de los capilares.

- Protege los melanocitos y evita la formación de nuevas manchas.
- No es invasivo ni fotosensibilizante.



CON ESTOS SATÉLITES PODEMOS
REALIZAR LOS TRATAMIENTOS PARA
LAS MANCHAS SOBRE LAS MANOS, LOS
BRAZOS, LA ESPALDA Y EL PECHO.

| TRATAMIENTO ACLARANTE DE MANCHAS |

Purelight Green

Código unitario: 9411486



**FÁCIL MANIPULACIÓN
SATÉLITES ERGONÓMICOS
PARA MANCHAS CONCRETAS O
DISPERSAS**

El tratamiento Purelight Green se compone de 3 etapas:

Etapas 1: Estimulación de los fotorreceptores con la emisión de una luz constante.

Etapas 2: Ligerio masaje a través de una luz intermitente con el fin de iniciar el mecanismo de reparación.

Etapas 3: Emisión de una luz constante para estimular el efecto de aclarado sobre los melanosomas.

El estudio confirma que:

Aumenta un 35 % el resultado si se realiza una microdermoabrasión antes de la aplicación de la luz.

-Incluir la mesoterapia virtual (Dermalift) con la aplicación del gel luminiscente con activos aclarantes ayuda a proteger y conservar el buen funcionamiento del melanocito.

Nosotros no seguimos las tendencias, las creamos para ti.

**DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPAÑA
MASTRIN S.A.**

Pol. Ind. Río de Janeiro

C/ Pelaya, 21 C Naves 4 y 5

28110 Algete MADRID (ESPAÑA)

Tel: 91 628 42 25 - Fax: 91 628 42 16



SILHOUET-TONE



Derma•Pod: Tecnologías integradas de vanguardia para regenerar la piel y satisfacer a su exigente clientela

- Microdermoabrasión uniforme y controlada
- Programas de tratamientos antiarrugas
- Rejuvenecimiento de todas las capas de la piel
- Nuevos procedimientos de lifting por microcorrientes
- Procedimientos exclusivos de remodelación del escote
- Fototerapia antiarrugas mediante DEL
- Fototerapia para la piel con tendencia al acné
- Tratamiento de cicatrices y estrías
- Fototerapia para los problemas de pigmentación
- Difusión tópica transdérmica: Mesoterapia Virtual

¡Con el nuevo Derma•Pod basta con un solo aparato!

Estamos convencidos de que la sinergia producida por la combinación de aplicaciones múltiples da verdaderamente resultados superiores.

Fácil de utilizar

Basta con elegir el programa y Derma•Pod se encarga del resto:

- Elige la corriente apropiada
- Selecciona las modulaciones correspondientes
- Establece la duración del tratamiento

Características

- 2 manipuladores
- 4 nuevas funciones disponibles en un sistema de microdermoabrasión de vanguardia
- Tecnología de microabrasión dérmica mejorada con proyección Turbo Flow
- 2 tecnologías con ondas luminosas por medio de DEL a:
 - 640 nm para cuidados antiarrugas
 - 420 nm para el tratamiento del acné
- 2 nuevas formas de microcorrientes:
 - para el lifting del rostro y del cuerpo
 - para difusión tópica transdérmica
- El Derma•Pod es increíblemente estable y móvil, se desplaza fácilmente.
- Selección automática de parámetros (preprogramación)
- Pantalla de cristales líquidos

Jornada de Puesta en Marcha en su centro y material de apoyo

- Panel díptico o póster
- Manual de formación y folletos
- CD de formación

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	240 v- 60 hz
Consumo	400 W
Anchura	39.4 cm (15.5")
Altura	22.9 cm (9")
Profundidad	54.6 cm (21.5")
Peso	13.84 kg (30.5 lbs)
Potencia de aspiración	26 pulg. Hg / 655 mm Hg / 0,88 BAR
Caudal de aire máximo	4,8 m ³ / H (2,8 pi ³ /minuto)
Fusible de protección	220 voltios = 5 A SB 250 V
Microprocesador electrónico	



SILHOUET-TONE®

www.silhouet-tone.com

Nosotros no seguimos las tendencias, las creamos para ti

SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A.
9, route Suisse, CH-1295-Mies, Suisse
Tél.: + 41.22.775.15.60
Télé./Fax: +41.22.775.15.67
ste@silhouet-tone.com

SILHOUET-TONE (CANADA) LTD
1985, Monterey, Laval (Québec)
H7L 3T6 Canada
Tél.: (450) 688-0123, 1 800 361-3004
Télé.: (450) 688-0803
infost01@silhouettone.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPAÑA
MASTRIN SA
C/ Victor Andrés Beláunde 48-50
28016 MADRID (ESPAÑA)
Tél.: 914574771-914574202



*Sitios: Tolhurst, Michelin, Monterey.

Silhouet-Tone 14 06 06

CÓDIGO

