

**USTED SABE CÓMO SE SIENTE
CUANDO LE FALTA LA LUZ...**

**¿PUEDE IMAGINAR CÓMO ESTÁ SU
PIEL SIN ELLA?**



SILHOUET-TONE®

Iluzmine su piel



SOLI-TONE 2500
Infinite energy

TERAPIA FOTODINÁMICA (PDT)
Un trabajo constante a nivel interno
para resultados superiores a largo
plazo. Su equipo indispensable para el
día a día, con tratamientos ilimitados.

La soluzión, en su negocio

SOLI-TONE 2500

Infinite energy

Tecnologías complementarias que se potencian mutuamente.

TECNOLOGÍAS DE LUZ: TERAPIA FOTODINÁMICA (PDT)



- Utilización de 4 tipos de luces puras, 4 longitudes de onda específicas.
- Un solo panel con 2500 LEDs Diodos extrasuperluminiscentes.
- Máxima calidad en los LEDs, más potencia: se reduce el tiempo de tratamiento.
- Panel flexible y articulado para tratar diferentes zonas.

La luz, fuente de vida

La luz es energía, es la fuente de todas las formas de vida en la Tierra, interviene en todas las funciones vitales. Desempeña una función importante en la producción de sustancias químicas y hormonales. Dichas sustancias controlan todos los procesos relacionados con la calidad de vida: la presión arterial, el humor, el sistema inmunitario, el envejecimiento, el sueño, el dolor...


La luz es una tecnología segura, no invasiva, y tiene un enorme efecto en los biorritmos de todas las formas de vida. Diversos estudios médicos y científicos realizados por la NASA, demuestran numerosos efectos beneficiosos:

1. Mayor producción de ATP.
2. Estimulación de la producción de colágeno **x 5**.
3. Aumento de la división celular.
4. Mayor actividad del sistema linfático.
5. Mayor síntesis de ADN y ARN.

Nuestra luz: nuestros LEDs

Los 2500 Diodos extrasuperluminiscentes ofrecen mayor potencia, más de 10 veces la de los diodos normales.

Cuatro luces puras diferentes que podemos aplicar individualmente o conjuntamente, para amplificar la acción del tratamiento.

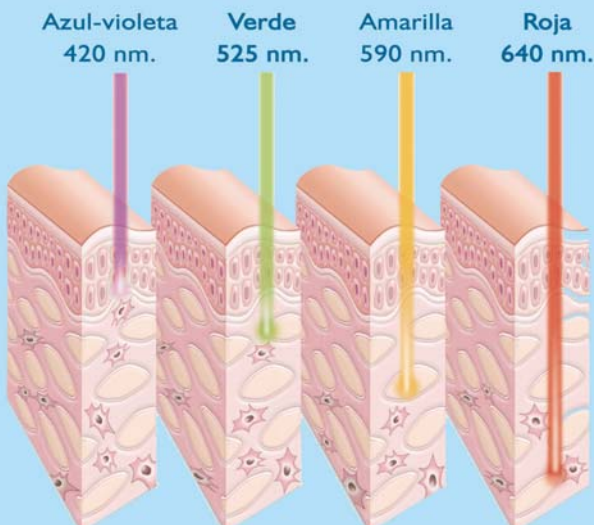

¡La fotobioestimulación es una clase aparte!

TECNOLOGÍAS DE MICROCORRIENTES

- Combinación única de dos corrientes para lograr una estimulación muscular amplificada.
- Mejoran el neuro-comportamiento muscular, gracias a esto aseguran la regeneración del ADN (Basado en los estudios del Premio Nobel 1991, Doctor Sakman y Doctor Neher)



Las microcorrientes

La combinación de la fototerapia con las microcorrientes permite tratar y disminuir el envejecimiento de la piel a tres niveles: epidermis, dermis, músculo.

Las corrientes de micro-neuro-estimulación permiten re-educar a los músculos combinando dos tipos de corrientes que:

- Estimulan las corrientes biológicas naturales del cuerpo.
- Realizan un lifting de los músculos debilitados.
- Estimulan los neuro-receptores musculares.
- Regeneran el tejido muscular.

Con el paso del tiempo, los músculos faciales pierden su forma y se deteriora la comunicación entre los receptores musculares y el sistema nervioso central. Las microcorrientes impulsadas contribuyen a abrir la vía iónica de las membranas celulares, aseguran una mejor comunicación entre el núcleo celular y la energía intercelular.

	ACCIONES	TRATAMIENTOS
Azul-violeta 420 nm.	<ul style="list-style-type: none">• Anti-inflamatoria.• Antibactericida.• Impide el desarrollo y propagación de comedones.• Regula la secreción sebácea.	<ul style="list-style-type: none">• Congestiones.• Acné, imperfecciones.• Completa higienes, extracciones.• Pielés grasas.
Verde 525 nm.	<ul style="list-style-type: none">• Reparadora y calmante.• Activación circulatoria.• Activación linfática.• Aclarante.• Ralentiza la producción de melanina entre un 40-60%	<ul style="list-style-type: none">• Congestiones.• Rosácea.• Hiperpigmentaciones.• Oxigenaciones.• Rojeces e inflamación.
Amarilla 590 nm.	<ul style="list-style-type: none">• Mejora la función linfática.• Anti-inflamatoria.• Reparadora.	<ul style="list-style-type: none">• Oxigenante.• Desintoxicante.• Reparadores médicos.• Postquirúrgicos.
Roja 640 nm.	<ul style="list-style-type: none">• Regeneración mitocondrial.• Multiplica por 5 la producción de Colágeno.• Activación de los fibroblastos.• Activación de la división celular (mitosis).• Aumenta la síntesis de proteínas.• Ralentiza la degeneración del Colágeno.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoenvejecimiento.• Envejecimiento natural.• Prevención del envejecimiento de la dermis.• Mantenimiento y prevención de la degradación de la dermis.

¡La fotobioestimulación es una clase aparte!


TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS: SONOFORESIS



- Reducen el peso molecular del producto para mejorar su absorción.
- Realizan la apertura de la vía de entrada en la piel.
- Realizan un micromasaje en la membrana celular para oxigenar.

Los ultrasonidos:

Los ultrasonidos producen una fricción molecular o micromasaje celular (3 Mhrz = 3 millones de vibraciones por segundo) que:

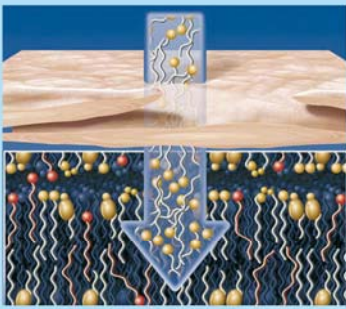

1. Estimula el sistema linfático.
2. Desintoxica el tejido conjuntivo.
3. Equilibra la fibrosis disminuyendo las cicatrices.
4. Aumenta la producción de colágeno y elastina.
5. Hidrata la piel, destruye bacterias, con lo cual se obtienen resultados a la vista y al tacto desde el primer tratamiento.
6. Incrementa la permeabilidad de la membrana celular.
7. Permite la penetración de productos a través de la epidermis.
8. Reduce el tamaño molecular del producto para su mejor asimilación.



COMPATIBLE CON:

- Botox y agentes de relleno dérmico.
- Depilación por láser.
- Luz pulsada intensa (IPL) y abrasiones químicas.
- Tratamientos quirúrgicos, antes y después, para facilitar la curación de las heridas y disminuir el tiempo de recuperación.



2 tratamientos a 1 cliente



tratamientos simultáneos a 2 clientes

¿Qué ofrece Soli-Tone 2500?

¡Una combinación perfecta! Equipo integral para el cuidado global de la piel:

1. Múltiples tratamientos, faciales y corporales.
Rostro, contorno de ojos, pecho, antebrazos, abdomen, espalda...
2. Tecnologías múltiples a utilizar juntas o por separado.
3. Gran potencia: reduce los tiempos de exposición.
4. Adaptado a todo tipo de personas, pieles y edades.
5. Tablero articulado y ergonómico.
6. Programas predeterminados y personalizables.
7. Compatible con otros tratamientos.
8. Dos plataformas en un equipo:
2 tratamientos al mismo tiempo a 1 cliente.
Tratamientos simultáneos a 2 clientes.
9. Máxima rentabilidad.

Datos Técnicos

Diodos extrasuperluminiscentes: 2500 LEDs

Tablero articulado para múltiples opciones de posición

Superficie de LEDs del tablero: 1525 cm²

Alimentación eléctrica: 110 v - 60 hz
220/230 v - 50 hz

Controlado por microprocesadores electrónicos

Dimensiones:

- Anchura: 78 cm
- Altura: 118 cm
- Profundidad: 77 cm
- Peso: 36 kg



DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
MASTRIN S.A.
Pol. Ind. Río de Janeiro
C/ Pelaya, 21 C Naves 4 y 5
28110 Algete MADRID (ESPAÑA)

Tel: 91 628 42 07
Fax: 91 628 42 16

www.silhouet-tone.es
info@silhouet-tone.es



	Intensidad de rendimiento:	510 mW/cm ² > 153 julios en 5 min.
	Longitud de onda:	420 nm.
	Escala de la dosis:	de 153 J (5 min) a 918 J (30 min).
	Intensidad de rendimiento:	40 mW/cm ² > 12 julios en 5 min.
	Longitud de onda:	525 nm.
	Escala de la dosis:	de 12 J (5 min) a 72 J (30 min).
	Intensidad de rendimiento:	15 mW/cm ² > 5 julios en 5 min.
	Longitud de onda:	590 nm.
	Escala de la dosis:	de 5 J (5 min) a 30 J (30 min).
	Intensidad de rendimiento:	120 mW/cm ² > 36 julios en 5 min.
	Longitud de onda:	640 nm.
	Escala de la dosis:	de 36 J (5 min) a 216 J (30 min).